

## JOBST UltraSheer Rajstopy CCL 1, palce odkryte, kolor czarny, długość petite



Cena od: 302,99 zł

Opis słownikowy

CZAS DOSTAWY 2-10 dni

Opis produktu

### Rajstopy uciskowe JOBST UltraSheer CCL1 (1 klasa kompresji)

to eleganckie, cienkie i transparentne produkty uciskowe, które wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne rajstopy, pończochy i podkolanówki. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien są łatwe do zakładania i zdejmowania, doskonale dopasowują się do kształtów ciała i pozwalają skórze oddychać. Są miękkie w dotyku, zapewniają nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim wspierają krążenie.

#### NOWE OPAKOWANIA JOBST

Marka JOBST zmienia opakowania produktów - unikalny design i nowa kolorystyka, aby w prosty sposób identyfikować linie produktowe i potrzeby pacjentów. Produkt wewnątrz jest ciągle ten sam, nie zmienia się. Zmiana jest sukcesywna i płynna, więc w ramach zamówienia może być wysłane dotychczasowe opakowanie lub nowe, w zależności czy dany produkt został już wyprodukowany w nowym opakowaniu.

### SZCZEGÓŁY:

**KLASA KOMPRESJI:** I (18-21 mmHg)

**DŁUGOŚĆ:** Petite

**WERSJA:** Palce odkryte

**KOLOR:** Black (Czarny)

**PRZEZNACZENIE:** dla kobiet, dla mężczyzn

**SKŁAD:** 53% poliamid, 47% elastan

**OPAKOWANIE:** 1 sztuka

**DOSTĘPNE INNE KOLORY:** Natural, Golden Beige, Caramel, Tan, Bronze, Espresso, Cranberry, Navy, Anthracite, Black



### Transparentne

Cienki przezroczysty materiał, zapewnia elegancki wygląd



### Oddychające

Przepuszczają powietrze, zapewniając komfort noszenia przez cały dzień



### Lśniące

Delikatny połysk sprawia, że nogi wyglądają pięknie i zdrowo

## WSKAZANIA:

- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Pajęczki
- Łylaki
- Przewlekła choroba żylna
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

## JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Zmierz nogi w następujących miejscach:

1. Obwód w najwęższym miejscu nad kostką (cB)
2. Obwód w najszerszym miejscu w łydce (cC)
3. Obwód 2 cm pod kolaniem (cD)
4. Zmierz długość nogi – mierzymy na bosą, prosto postawioną stopę na podłodze, po wewnętrznej stronie nogi, od podłogi do 2 cm pod kolaniem

### Tabela rozmiarów

Obwód w cm							Przeгляд wszystkich obwodów i długości
Punkt pomiaru ▼	Rozmiary						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG standard	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG wide	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Długość w cm							
AD	Długość	/D	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		/G	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT		/K	Regular	75-85	Petite	65-75	
Max. Część brzuszna Zalecenia w zależności rozmiaru	I	od talii 80, bioder 95		IV-V	od talii 110. Bioder 125		
	II-III	od talii 90, bioder 105		VI	od talii 120, bioder 135		

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kości. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie produktów uciskowych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić wygodne obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

## SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

## BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żyły

## WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Słabość skóry
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

## OSTRZEŻENIE:


Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie produktów medycznych uciskowych II klasy kompresji należy skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry trzeba przestać noszenia i zgłosić to lekarzowi.

## To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

### Warianty produktu

	Rozmiar 1, długość petite Rozmiar 1, długość petite	302,99 zł
	Rozmiar 2, długość petite Rozmiar 2, długość petite	302,99 zł
	Rozmiar 3, długość petite Rozmiar 3, długość petite	302,99 zł
	Rozmiar 4, długość petite Rozmiar 4, długość petite	302,99 zł
	Rozmiar 5, długość petite Rozmiar 3, długość petite	302,99 zł
	Rozmiar 6, długość petite Rozmiar 6, długość petite	302,99 zł

Galeria

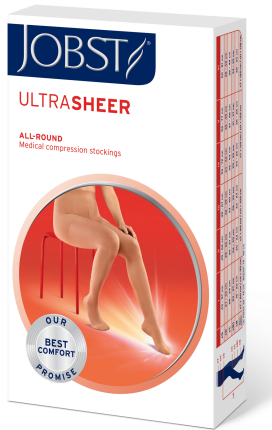

Przewidziane zastosowanie

CD	C1	C2	C3	C4
Wzrostowe	Przewlekłe	Przewlekłe	Przewlekłe	Przewlekłe

Tabela rozmiarów

Przebieg choroby	Ciężar ciała					
	I	II	III	IV	V	VI
CD (cm)	42-48	48-54	54-60	60-66	66-72	72-78
C1 (cm)	33-37	35-39	37-41	39-43	41-45	43-47
C2 (cm)	33-37	35-39	37-41	39-43	41-45	43-47
C3 (cm)	33-37	35-39	37-41	39-43	41-45	43-47
C4 (cm)	33-37	35-39	37-41	39-43	41-45	43-47

Przebieg produktów

Wzrost	CD 16-21 mmHg	CD 23-30 mmHg	CD 35-40 mmHg	CD 40-50 mmHg
160-170	●	●	●	●
170-180	●	●	●	●
180-190	●	●	●	●
190-200	●	●	●	●
200-210	●	●	●	●

- Kryjące**  
Maskują drobne niedoskonałości i zapewniają stylowy wygląd.
- Odprowadzają wilgoć**  
Pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień.
- Soft Touch**  
Mieszanka delikatnych dla skóry włókien

